




Una completa gama de amalgamas de alta calidad

La oferta incluye aleaciones mezcladas de la máxima resistencia, aleaciones dispersas de homogeneidad y propiedades de manipulación clínica de primera clase. Nuestras amalgamas tienen una calidad superior en muchos aspectos. Presentan una expansión bien equilibrada y gran fuerza. Esta combinación aporta márgenes ajustados, obturaciones duraderas y pocas ranuras en los bordes.

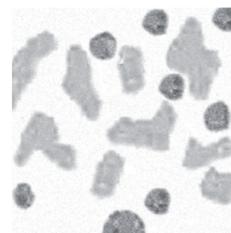

Combinación de partículas cortadas esféricas y cortadas con torno, ANA 2000

Partículas cortadas con torno y aleación de cobre y plata eutéctica de forma de partículas esféricas, ANA 70

COMPOSICIÓN
 Ag 43,1%
 Sn 30,8%
 Cu 26,1%

PROPIEDADES FÍSICAS
 Fuerza de compresión:
 1 h 140 MPa
 24 h 450 MPa
 Fluencia estática: 0,1%
 Cambio dimensional:
 24 h +0,02%

COMPOSICIÓN
 Ag 69,9%
 Sn 18,8%
 Cu 10,2%
 Zn 1,1%

PROPIEDADES FÍSICAS
 Fuerza de compresión:
 1 h 110 MPa
 24 h 420 MPa
 Fluencia estática: 1,0%
 Cambio dimensional:
 24 h +/- 0,1%

ANA 2000®
 High Copper Admixed Alloy
 Non Gamma 2

DISPONIBLE EN:
 DUETT
 CÁPSULAS
 POLVO

ANA 70
 Dispersed Alloy
 Non Gamma 2

DISPONIBLE EN:
 DUETT
 CÁPSULAS
 POLVO

ANA 2000

■ DATO	● BENEFICO
Rica en cobre	Duradera, resistente y fuerte
Expansión controlada	Adaptación excelente de los bordes
Partículas cortadas con torno	Sensación crujiente durante la condensación
Breve tiempo de fraguado	Ahorro de tiempo

ANA 70

■ DATO	● BENEFICO
Rica en plata	Superficie plateada brillante
Partículas esféricas	Sensación suave de condensación



Un amigo en quien confiar Amalgamas ANA



Nordiska Dental AB, Box 1082, SE-262 21 Ängelholm, Location; Framtidsgatan 1b, SE-262 73 Ängelholm, Sweden.
 Tel: +46 431 44 33 60, Fax: +46 431 44 33 99
 www.nordiskadental.se, mail@nordiskadental.se, certified acc. to ISO 13485



“Una amalgama de calidad superior no se caracteriza por mayor cantidad de plata, sino por más cobre.”

ANA 2000



Duett® – ¡La seguridad y comodidad de las cápsulas a un precio económico!

El sistema de cápsulas Duett es ecológico en comparación con la presentación de otras cápsulas. Las cápsulas reutilizables están especialmente diseñadas para ser ajustadas, con lo que se garantiza la seguridad y la higiene. Duett también es económico en comparación con las cápsulas desechables. No hay duda de la comodidad de tener una sola caja, en lugar de una para cada dosis.

DUETT® – EMBALAJE ÚNICO

■ DATO	● VENTAJAS
Económico	Ahorro en comparación con otros tipos de cápsulas
Ecológico	Menos material de desecho
Comodidad	Fácil de dispensar y mezclar
Seguridad	Sin mercurio suelto
Higiene	Baja exposición al mercurio



FÁCIL DE USAR

Usar las pinzas al cargar las cápsulas con una o dos bandejas y uno o dos saquitos de mercurio. Rápido, y al dosificar las cápsulas por adelantado siempre tendrá las cápsulas listas para usar. La cantidad es siempre la misma. No hay riesgo de derramar la aleación o el mercurio, con lo que es más económico e higiénico.

NOTA
La bandeja de aleación contiene 390 mg y la bolsa de mercurio de 390 mg.

TAMAÑOS DE ENVASE:



Duett® 400
400 pastillas y 400 bolsitas de mercurio, 8 cápsulas reutilizables



Duett® 200
200 pastillas y 200 bolsitas de mercurio, 4 cápsulas reutilizables



Duett® 50
50 pastillas y 50 bolsitas de mercurio, 2 cápsulas reutilizables

Polvo - oportunidades de mezcla flexibles

La aleación de Nordiska es muy conocida, por lo que habla por sí sola. Muchas generaciones de odontólogos de todo el mundo han realizado empastes muy duraderos con ANA 2000.

POLVO

● VENTAJAS
Relación flexible de mezcla
Precio



500 g.



250 g.



30 g.

POLVO
Polvo es disponible en botellas selladas de 500 g, 250 g o 30 g

Cápsulas predosificadas desechables

Gracias a la dosis exacta en cada cápsula de usar y tirar, se garantiza la consistencia - ¡constantemente! Hoy en día, en que el tiempo es esencial, es importante disponer de un sistema dispensador que permita una manipulación rápida y sencilla. Nuestras cápsulas, con una baja exposición a mercurio, hacen que esto sea posible. Como nuestras cápsulas son de activación automática, son muy prácticas.

ANA 2000 -

Las cápsulas de usar y tirar, ANA 2000, han sido mejoradas para alcanzar un nivel de calidad incluso más superior. El nuevo diseño especial aporta una mezcla homogénea.

CÁPSULAS

■ DATO	● BENEFICO
Nuevo diseño	Amalgamación óptima Seguras y estancas
Predosificado	Consistencia exacta Ahorra de tiempo
Auto activación	Fácil de mezclar
Clasificadas por colores	Fácil de diferenciar



CÁPSULAS ANA 2000

Nº 1 – Cápsula verde (aleación de 400 mg +400 mg de mercurio)
Nº 2 – Cápsula azul (aleación de 600 mg +600 mg de mercurio)
Nº 3 – Cápsula gris (aleación de 800 mg +800 mg de mercurio)



Las cápsulas están disponibles en cajas de 50 o 450 capsule.

ANA 70 -

CÁPSULAS

■ DATO	● BENEFICO
Predosificado	Consistencia exacta Ahorra de tiempo
Auto activación	Fácil de mezclar
Clasificadas por colores	Fácil de diferenciar



CÁPSULAS ANA 70

Nº 1 – Cápsula dorada (aleación de 400 mg +430 mg de mercurio)
Nº 2 – Cápsula naranja (aleación de 600 mg +640 mg de mercurio)
Nº 3 – Cápsula violeta (aleación de 800 mg +860 mg de mercurio)